



Інструкція лінза ретинальна

Модель: 20D, 78D, 90D

Дякуємо за придбання нашого товару.

Призначення :


Лінза ретинальна для перевірки внутрішнього стану очей та отримання зображення сітківки (очного дна) пацієнта під час проведення діагностики з використанням щілинної лампи

Наша продукція відповідає відповідним вимогам стандарту ISO 13485.

Технічні характеристики

Модель	Збільшення зображення	Розмір лазерної плями	Поле зору градус°	Робоча відстань мм	Діаметр мм	Розмір мм
20D	3.13X	0.32X	46°	50.0	48.0	Φ56×20
78D	0.93X	1.08X	81.4°-97°	8.0	26.0	Φ33×15
90D	0.76X	1.32X	74.2°-89°	7.0	21.0	Φ27×13

Колір: чорний

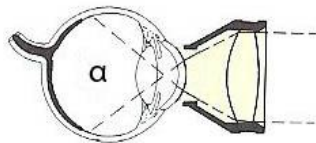

Інструкція з використання:

- Користувачі повинні бути ознайомлені з принципом роботи лінзи та щілинної лампи.
- Під час використання лінзи для огляду очей пацієнтів користувач повинен правильно вирівняти лінзу та переконатися, що захисне кільце лінзи спрямовано до лікаря, а інша сторона — до очей пацієнта.
- Між лінзою та очима пацієнта має бути достатня відстань, щоб розмір зображення сітківки відповідав діаметру лінзи.
- Будь ласка, максимально зменшіть яскравість освітлення. Це дозволить зменшити відбиття світла та покращити контрастність зображення.

Очищення та догляд:

Очищення: Протріть лінзи м'якою бавовняною серветкою, змоченою в абсолютному спирті.

Дезінфекція: Помістіть лінзи в дезінфікуючий розчин глутаральдегіду на 20 хвилин, промийте їх холодною або теплою водою, а потім, після провітрювання, зберігайте в спеціальному футлярі.

Стерилізація: Стерилізуйте лінзи в етиленоксиді (54 °C) протягом однієї години, а потім залиште їх провітрюватися на 12 годин.

Попередження: Не піддавайте лінзи дії високого тиску та не кип'ятіть їх для стерилізації.

Примітки:

- Не зберігайте та не використовуйте це обладнання в умовах, що характеризуються наявністю легкозаймистих або вибухонебезпечних речовин, а також при високих температурах, високій вологості та запиленості. Використовуйте його в чистому приміщенні та стежте за тим, щоб виріб залишався чистим і сухим.
- Не протирайте поверхню лінзи руками або твердими предметами.

версія: 1.0

20140520

ipm

MediWorks

Уповноважений представник в Україні

ТОВ «АЙ ПІ МЕДІКАЛ»

+38 067 718 4906

+38 095 688 9816

office@ipm.ua

www.ipm.ua

Виробник:

Шанхай МедіВоркс Прецізійн Інструментс КО., Лтд

